

AB01 BOXIA A.F.O. PIED TOMBANT



Caractéristiques:

Le support de pied tombant Boxia® soulève l'avant-pied, permettant une flexion plantaire au niveau du talon en descendant du pied. Il empêche le risque de trébucher sur des objets usuels, tels que des tapis, des bordures et des surfaces irrégulières. L'instrument Boxia® se compose de 2 parties distinctes; un support au-dessus des chevilles et une section de support antidérapante à mettre entre la languette et les lacets par l'intermédiaire d'une attache central de type crochet (doit être porté avec des chaussures à lacets). L'arrière de la sangle est doté d'un rembourrage intérieur en gel pour le confort sur le tendon d'Achille, tandis que la zone du cou-de-pied est doublée pour éviter les frottements et les compressions indésirables.



Indications:

- Accident Vasculaire Cérébral
- Traumatisme Cérébrale
- Paralyse Flaque

Comment ça Fonction:

Le support supramalléolaire de l'instrument Boxia conserve une grande quantité d'énergie, similaire à un pivot (point de support), pour lui permettre de transférer les forces nécessaires pour soulever un pied paralysé. Dans les cas où un patient présente une intolérance due à une force excessive, le support de mollet Boxia est recommandé. Il aide à stabiliser l'orthèse et à limiter les forces et les contraintes en les transférant de la cheville au mollet.



Avantages:

Discret, confortable et flexible. Il occupe peu d'espace dans la chaussure et est facilement ajustable.

ITEM	TAILLE	PÉRIMÈTRE EN CM
AB01-XS	Très Petit/ 0	13 - 17
AB01-SM	Petit / 1	17 - 21
AB01-MD	Moyen / 2	21 - 25
AB01-LG	Grand 3	25 - 29



Voir au verso pour des accessoires supplémentaires

AB12 SUPPORT d'ARCHE INTÉRIEURE



Caractéristiques:

Anatomiquement conçu à la forme d'un pied gauche ou droit, pour soutenir la voûte plantaire avec rembourrage.

PVeuillez noter que l'item AB12 contient uniquement la partie inférieure du pied. Vous devez donc déjà avoir l'item AB01 (Boxia support de pied tombant).

DROIT	GAUCHE	TAILLE	PÉRIMÈTRE EN CM
AB12D-SM	AB12I-SM	Petit / 1	17 - 21
AB12D-MD	AB12I-MD	Moyen / 2	21 - 25
AB12D-LG	AB12I-LG	Grand / 3	25 - 29




Mesurez
autour du
cou-de-pied



ABI I BOXIA CROCHET d'ATTACHEMENT

Cette Crochet d'Attachelement supplémentaire est disponible en une seule taille universelle et est disponible sur commande spéciale seulement.

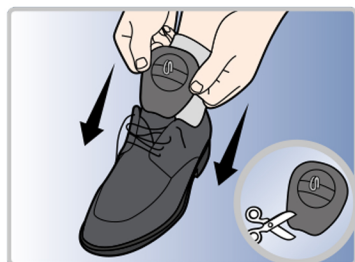

Voir au verso pour des accessoires supplémentaires