



allard^{INT}

Un nouveau repose-pieds en carbone d'Allard International !

La nouvelle plaque de pied en carbone Allard est développée avec plus de 25 ans d'expérience dans les OTP en composites de carbone. La plaque de pied est autoclavé, légère et reflète la silhouette de la chaussure pour un ajustement plus confortable. La plaque de pied contribue à une douleur minimisée pour les patients souffrant de diverses fractures de stress, blessures ou arthrites dans la zone de l'avant-pied ou de mi-pied.



Support for Better Life!

Un nouveau repose-pieds en carbone d'Allard International !

La plaque de pied en carbone est destinée à protéger les articulations MTP et l'avant-pied en limitant la mobilité, en distribuant la pression dans l'avant-pied et en facilitant le roulement. La plaque de pied peut également être utilisée pour augmenter progressivement le mouvement après un traitement d'immobilisation avec une chaussure ou une botte de marche post-opératoire. Il peut améliorer l'équilibre après l'amputation d'un orteil, la fouille IV, et/ou V.


La plaque plantaire doit être recouverte d'une semelle intérieure ou d'une orthèse plantaire sur mesure.

Indications :

Hallux rigidus, hallux limitus, fractures de stress et autres blessures ou conditions d'arthrite dans l'avant-pied / mi-pied, traumatisme de l'avant-pied, entorse de l'orteil.

Ajusté aux chaussures ayant un dénivelé de 7 à 10 mm.

Limite la ADM à réduire la douleur.

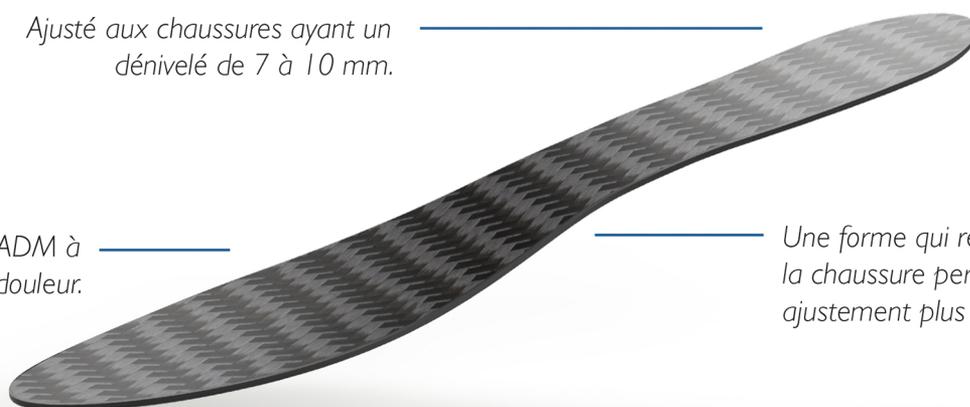

Une forme qui reflète celle de la chaussure permet un ajustement plus confortable.

Numéro de l'article	Taille	Gauche/Droite	Longueur	Largeur
28035	S	Gauche/Droite	235 mm	77 mm
28035	M	Gauche/Droite	255 mm	80 mm
28035	L	Gauche/Droite	275 mm	90 mm
28035	XL	Gauche/Droite	305 mm	99 mm

À l'avant-garde des composites de carbone

Avec plus de 25 ans d'innovation et de développement des OTP Allard, nous avons accumulé des connaissances et une expertise approfondie dans les matériaux composites et les techniques de traitement. Notre plaque de pied carbone est produite dans une installation de pointe, en utilisant les dernières techniques et équipements de fabrication composites. Avec toutes les exigences d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables, nous pouvons fièrement dire que notre produit est fabriqué avec des énergies renouvelables à 100%.



Produits Orthopédiques Professionnels

Téléphone Sans Frais: 1-866-334-4441

csr@poportho.com

www.poportho.com