

NOUVEAU
DESIGN

DynaTrack™ Plus

Stabilisateur patellaire



Grâce au design breveté de son contrefort, le stabilisateur patellaire DynaTrack™ Plus aide au traitement des problèmes fémoro-patellaires. Outre le soulagement de la douleur, vos patients et athlètes apprécieront le confort et l'ajustement qu'ils obtiendront grâce au design discret et à la légèreté du DynaTrack™ Plus.


Système de contrefort dynamique

La conception brevetée du contrefort exerce une pression continue sur la rotule lorsque le genou est en pleine extension. Des courroies, à même le contrefort, vous permettent d'ajuster facilement le niveau de tension. Le contrefort est en contact direct avec la rotule et est doublé de Skinloc™ pour empêcher la migration.



Charnières médiale et latérale de plastique

Les charnières amovibles permettent à la genouillère d'épouser les formes du genou au moment d'une flexion et procurent une base stable au contrefort dynamique.

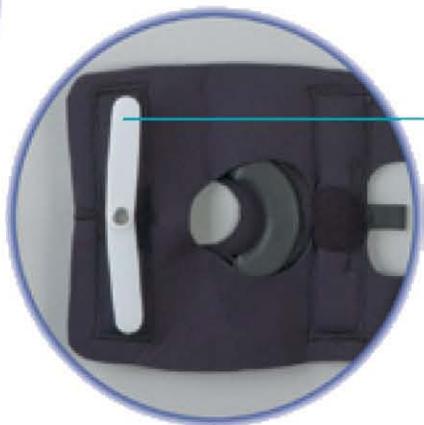

Ouverture poplitée

L'ouverture poplitée est suffisamment grande pour permettre un niveau élevé de flexion, sans inconfort.



Fermeture antérieure

La conception enveloppante facilite la mise en place et procure un ajustement optimal.

Design bilatéral qui s'ajuste sans distinction au genou gauche ou droit

Néoprène	Taille	Circonférence du genou*	CoolFlex
117001	Très Petit	10" - 12"	117021
117002	Petit	12" - 14"	117022
117004	Moyen	14" - 16"	117024
117005	Grand	16" - 18"	117025
117006	Très Grand	18" - 20"	117026
117007	TT-Grand	20" - 22"	117027
117008	TTT-Grand	over 22"	

La version en CoolFlex est perméable à l'air et légère, pour un confort accru.

La version en Néoprène procure un plus haut niveau de compression et de chaleur.

Medical Specialties, Inc.
4600-K Lebanon Rd.
Charlotte, NC 28227
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
e-mail: request@medspec.com
www.medspec.com
U.S. Patent # 7,004,919

©2006-2009 Medical Specialties, Inc.

DynaTrack is a trademark of Medical Specialties, Inc.



rev 7/09



010212

*Prendre la mesure de la circonférence du genou au niveau du centre de la rotule