

## MF-52 SUPPORT DE POIGNET SEMI-RIGIDE AVEC ATTELLE PALMAIRE



### Caractéristiques:

Le support de poignet semi-rigide MF-52 avec attelle Palmer comprend une base en tissu léger et respirant avec une couche de coton en contact avec la peau, offrant un plus grand confort et permettant aux doigts de bouger librement. L'attelle palmaire est en aluminium malléable et comporte 2 supports dorsaux en plastique pour un maintien efficace du poignet selon l'angle souhaité. La fixation est simple grâce au tissu élastique dorsal et la fermeture est rapide grâce à des bandes velcro ajustables et de boucles anti-torsion.

### Fonction:


Immobilisation fonctionnelle du poignet. Stabilisation des articulations carpiennes. Soulagement de la douleur.

### Indications:

- Syndrome du canal carpien.
- Entorses du poignet.
- Arthrose.
- Tendinite
- Surcharge des articulations du poignet.
- Instabilité résiduelle.
- Traitement pré / post-chirurgical et post-traumatique.



DROIT	GAUCHE	TAILLE	PERIMÈTRE EN CM	LONGUEUR EN CM
MF-D52 SM	MF-I52 SM	Petit / 1	12 - 16	17
MF-D52 MD	MF-I52 MD	Moyen / 2	16 - 18	17
MF-D52 LG	MF-I52 LG	Grand / 3	18 - 20	17

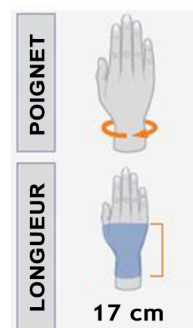

## MP-72 SUPPORT DE POIGNET SEMI-RIGIDE AVEC ATTELLE DE POUCE



### Caractéristiques:

Le support de poignet semi-rigide avec attelle pour pouce MP-72 comprend une base en tissu léger et respirant avec une couche de coton en contact avec la peau, offrant un plus grand confort et permettant aux doigts de bouger librement. L'attelle de pouce est en aluminium malléable et comporte 2 supports dorsaux en plastique pour un maintien efficace du pouce selon les angles désirés. En plus, l'attelle radiale présente une conception semi-circulaire pour un confort accru et un positionnement amélioré du pouce. La fixation est simple grâce au tissu élastique dorsal et la fermeture est rapide grâce à des bandes velcro ajustables et de boucles anti-torsion.



### Fonction:

Immobilisation fonctionnelle du pouce. Stabilisation des articulations carpiennes. Soulagement de la douleur.

### Indications:

- Rhizarthrose.
- Lésion du ligament collatéral ulnaire du pouce (pouce du skieur).
- Tendinite
- Ténosynovite de De Quervain
- Surcharge des articulations du poignet et du pouce.
- Instabilité résiduelle.
- Traitement pré / post-chirurgical et post-traumatique.



DROIT	GAUCHE	TAILLE	PERIMÈTRE EN CM	LONGUEUR EN CM
MP-D72 SM	MP-I72 SM	Petit / 1	12 - 16	21
MP-D72 MD	MP-I72 MD	Moyen / 2	16 - 18	21
MP-D72 LG	MP-I72 LG	Grand / 3	18 - 20	21

