

# MultiStatic

Articulations correctionnelles



*Produits Orthopédiques Professionnels*


# MultiStatic

## Articulations Correctionnelles

L'articulation correctionnelle MultiStatic offre un traitement statique rapide et adéquat des contractures - essentiellement consécutives à des troubles orthopédiques - selon le principe HLBS\*. Le réglage angulaire de l'articulation est effectué par un axe excentrique. L'articulation s'utilise dans les orthèses tant chez les enfants que chez les adultes.

\* HLBS = High Load Brief Stretch

**Utilisation prévue:** traitement statique des contractures corrigibles

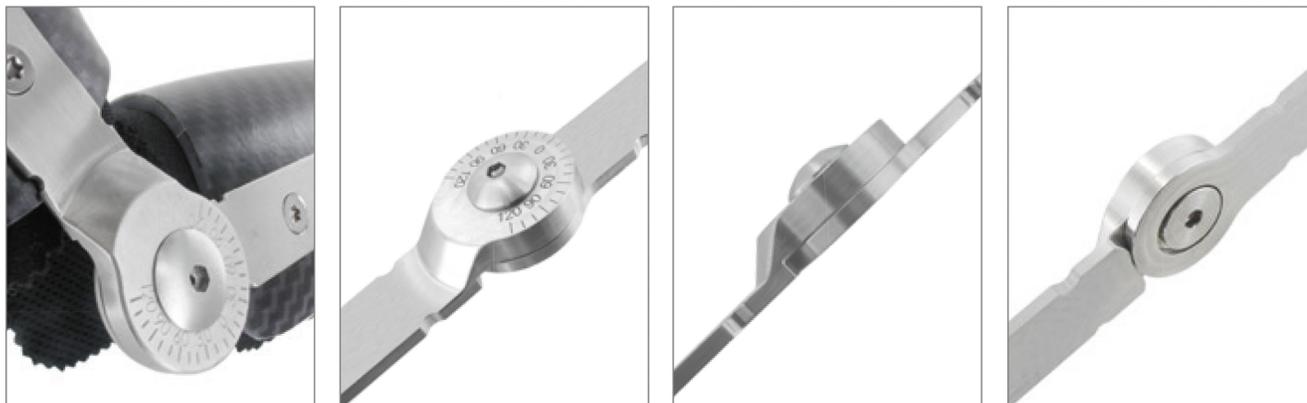

### Avantages lors de la réalisation des objectifs thérapeutiques

- Amélioration de l'amplitude de mouvement de l'articulation
- Apporter du soutien à l'articulation

### Fonction du produit

- Réglage en continu de l'extension ou de la flexion de l'articulation

### Caractéristiques

- Réglage angulaire simplifié grâce à l'axe articulaire positionné de manière optimale
- Utilisable dans le sens tant de la flexion que de l'extension
- Amplitude du mouvement de +120° à -120°
- Tiges intégrées
- Partie d'articulation et axe trempés
- Matériau: INOX

L'articulation de redressement MultiStatic est adaptée au traitement des contractures statiques d'origine neurologique ou orthopédique.

### Indications neurologiques

- Apoplexie (CVA)
- Paralysie cérébrale
- Traumatisme crâno-cérébral
- Dystrophie
- Sclérose en plaques
- État après lésion transversale
- Spina Bifida

### Indications orthopédiques

- Amputation
- Fractures
- État après rupture d'un ligament
- État après une chirurgie articulaire

### Contre-indications

- Fractures structurelles comme:
  - Ankylose
  - Fibrose
  - Ossification
- Déformation musculaire et osseuse
- Mauvaise circulation sanguine

## Tableau des dimensions

N° d'art.	Unité	Taille	Côté	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ø tête de l'articulation
MS02B-09	pièce	X-small	universeel	100 mm	9 mm	6,5 mm	14 g	11 mm
MS03B-12	pièce	small	universeel	400 mm	12 mm	8,5 mm	83 g	19 mm
MS04B-16	pièce	medium	universeel	400 mm	16 mm	9,5 mm	121 g	25 mm
MS05B-19	pièce	large	universeel	400 mm	19 mm	10,5 mm	151 g	30 mm


## Accessoires

### Unité d'alignement FreeMotion

Cette unité d'alignement simplifie la production de l'orthèse et constitue un outil pratique et de qualité qui peut être utilisé plusieurs fois pour l'alignement correct des articulations FreeMotion sur le plâtre..

#### Tableau de dimensions

N° d'art.	Unité	Description
AK-100	pièce	Barre en T
AK-103	pièce	Unité d'alignement

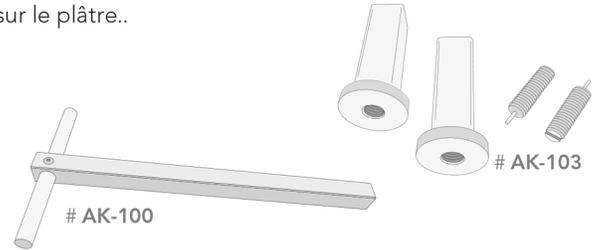


# FreeMotion

## Articulations libres

Cette articulation monoaxe est idéale pour une utilisation en tant qu'articulation libre en combinaison avec une articulation de redressement MultiStatic.

### Propriétés / caractéristiques

- Variations:
  - Adaptateur de tige modulaire proximal et distal <sup>(1)</sup>
  - Adaptateur de tige proximale, distale avec barre en T <sup>(2)</sup>
  - Tige proximale intégrée, distale avec barre en T <sup>(3)</sup>
  - Tiges intégrées proximales et distales <sup>(4)</sup>
- Amplitude du mouvement de +120° à -120°
- Matériau: acier inoxydable

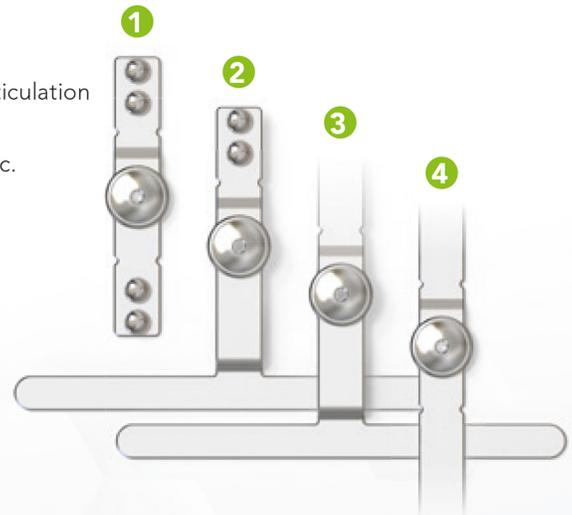

#### Tableau des dimensions

Nr.:	Numéro d'article	Unité	Taille	Côté	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ø tête de l'articulation	Offset de la barre en T	Distance de la face inférieure jusqu'à l'axe
1	FM03M-12	pièce	small	universel	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	FM03MT-12	pièce	small	universel	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	FM03B-12	pièce	small	universel	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
4	FM03BT-12	pièce	small	universel	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
1	FM04M-16	pièce	medium	universel	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
2	FM04MT-16	pièce	medium	universel	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
3	FM04B-16	pièce	medium	universel	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm
4	FM04BT-16	pièce	medium	universel	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm



***Produits Orthopédiques Professionnels***

***Produits Orthopédiques Professionnels***

Téléphone: (514) 484-4441 • Télécopieur: (514) 484-4431  
Téléphone Sans Frais (866) 334-4441 • Télécopieur Sans Frais (888) 484-4431

[csr@poportho.com](mailto:csr@poportho.com)

[www.poportho.com](http://www.poportho.com)