


# Neuroflex™ Restorative™ Coude

Traite les contractures légères à sévères du bras.

## Caractéristiques:

- Restaure l'amplitude normale du mouvement avec une étirement passif prolongée à faible charge, avec des propriétés flexibles pour détendre l'articulation.
- Les cadrans réglables s'enclenchent pour appliquer un léger étirement au niveau de l'articulation du coude afin d'obtenir une relaxation.
- Les barres latérales fléchissent lorsque le patient tire vers l'intérieur, puis ramène l'articulation à la position prédéfinie.
- Réinitialisez graduellement les cadrans pour amener l'articulation vers un alignement normal et rallonger le tissu raccourci.
- Confortable.

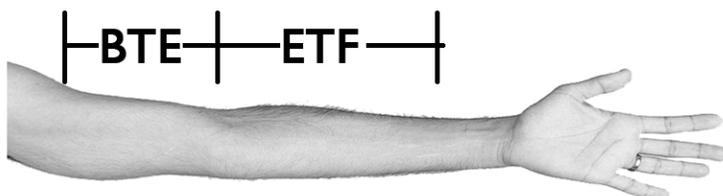

Size	BTE	ETF	Circ. Biceps	Circ. Avant-bras
Enfant	3 1/2"	4"	5 1/2 - 7 1/2	3 1/2 - 6 1/2
Jeune	4"	5"	6 1/2 - 8 1/2	5 1/2 - 7 1/2
Très Petit	5"	5"	7 1/2 - 9 1/2	6 1/2 - 8 1/2
Petit	5"	6"	8 - 12	7 - 10
Moyen	6"	6"	8 - 13	7 1/2 - 11
Grand	6 1/2"	6 1/2"	10 - 15	8 - 12

BTE = Bicep à Coude  
ETF = Coude à Avant-bras

Phone: 1-866-334-4441  
Fax: 1-888-484-4431



Online: [www.poportho.com](http://www.poportho.com)  
Email: [csr@poportho.com](mailto:csr@poportho.com)

Professional Orthopedic Products