

VECTOR ABDUCTED SHOULDER SLING


Cette écharpe offre un confort supérieur et une immobilisation de l'épaule grâce à son système de sangle Vector™ qui élimine la pression sur le cou. La région du coude de l'enveloppe de l'écharpe est ouverte pour minimiser la pression sur le nerf ulnaire. L'immobilisateur d'épaule Vector™ est disponible à la vente dans une configuration pour l'épaule gauche ou droite. Cependant, chaque Vector™ est bilatéral et peut être modifié pour s'adapter à l'épaule gauche ou droite. L'oreiller est conçu pour positionner le bras à environ 15° d'abduction.



Indications:

- Réparation de la coiffe des rotateurs
- Réparation de Bankart
- Instabilité de l'épaule
- Luxation ou subluxation glénohumérale
- Entorses ou tensions des tissus mous de l'épaule

TAILLE	GAUCHE	DROIT	MESURES
Petit	183702	183712	Jusqu'à 13 ½"
Moyen	183704	183714	Jusqu'à 14 ½"
Grand	183705	183715	Jusqu'à 15 ½"

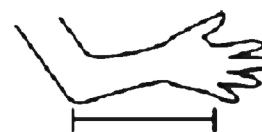

Pour déterminer la taille appropriée, mesurez la distance linéaire du processus d'olecranon (bout de coude) au 5^{ème} joint de MP (l'articulation)